



Csökkenti a kockázatot. Növeli a hatékonyságot.

Oxivir® Excel Foam

Szabadalmaztatott gyorsított hidrogén-peroxid alapú tisztító és fertőtlenítőszer.

Az AHP hatóanyagot tartalmazó Oxivir® fertőtlenítő tisztítószeresek átírják a fertőtlenítésre vonatkozó szabályokat : széles hatásspektrumú, valóságghú érintkezési idejű és kiváló tisztítóerejű készítmények, amelyek kitűnő felhasználói és felületi kompatibilitási profi lal és fenntartható hatóanyaggal is rendelkeznek.

- Használatra kész termék a gyorsabb fertőtlenítésért
- Hab állagú a biztonságosabb és hatékonyabb felhasználás érdekében
- Elpusztítja az alábbi reziszténstörzseket : MRSA, CRE, VRE, CRPSa
- Hatásos baktériumok és vírusok ellen 30 másodperc alatt
- Teljes virucid hatás, beleértve a burok nélküli vírusokat, mint a Norovírus és a Poliovírus
- Legfrissebb Európai Szabványok szerint tesztelve
- Yeasticid (élesztőgomba ölő) hatású – Candida albicans ellen tesztelve
- Hatékony felületaktív összetevői révén kiváló tisztítási teljesítményt nyújt, beleértve a vízkömentesítést is
- A kiváló felhasználói biztonsági profil csökkenti a munkavállalók kockázatát
- Nem minősül veszélyes keveréknek
- Nem tartalmaz légzést irritáló anyagokat
- Az AHP formula óvja a felületeket, ezáltal meghosszabbítva azok élettartamát
- CEIIa minősítésű orvostechnikai eszköz ; használható noninvazív orvostechnikai eszközök fertőtlenítésére
- Elérhető koncentrárum, hígított és kendő formában
- Használható nagy kockázatú területeken, beleértve ICU, OR, NICU és betegszobákban
- VAH mentes (illó aromás szénhidrogének)



Bactericid



Virucid



Yeasticid

ACCELERATED™
HYDROGEN PEROXIDE



Alkalmazható:



Az Oxivir Excel bármilyen kemény felületen alkalmazható, beleértve a rozsdamentes acélt, az üvegfelületeket, az akrilokat és a PVC-t. Nem alkalmas márványra, rézre, sárgarézre vagy más oxidatív hatású felületre.




Oxivir® Excel Foam

Szabadalmaztatott gyorsított hidrogén-peroxid alapú tisztító és fertőtlenítőszer.


Hatásspektrum	Szabványok	Hígítás és behatási idő	Szennyezett/Tiszta vizsgálati körülmények
Virucid (BVD & Mod VVA)	DVV limited virucidal test	30 másodperc	Szennyezett (FCS)
Virucid (Adeno, MNV, Polio)	EN 14476 fully virucidal statement	30 másodperc	Szennyezett
Bactericid	EN 1276	1 perc	Szennyezett
Yeastcid	EN 13624	5 perc	Szennyezett
Bactericid Yeastcid	EN 13697	5 perc	Szennyezett
Bactericid Yeastcid	EN 13697	5 perc	Szennyezett - Kórházi szennyeződés
Bactericid	EN 13727	30 másodperc	Szennyezett
Yeastcid	EN 1650	5 perc	Szennyezett
Bactericid Yeastcid	EN 16615	1 perc	Szennyezett

A teszteredmények kérésre rendelkezésre állnak


Használata

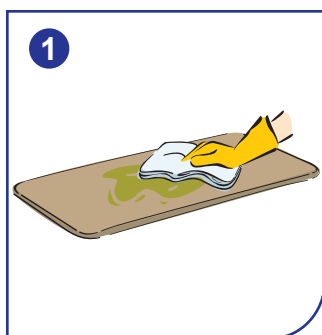


Távolítsa el a szennyeződést.

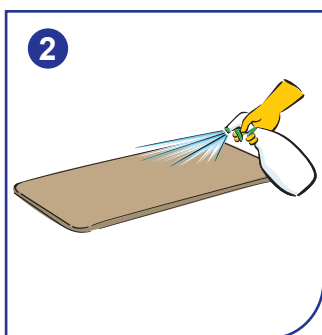

Vigye fel a terméket a tiszta felületre.

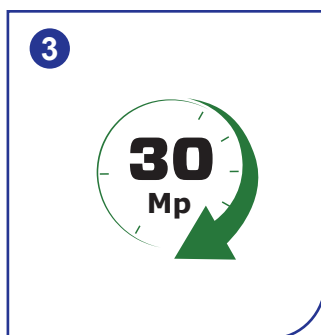

Az EN14476 szabvány szerint 30 másodperces behatási idővel virucid hatású.

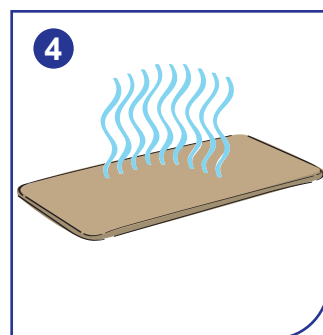

Levegőn hagyja megszáradni.

Összetétel

Oxivir Excel Foam:

100 g termék tartalmaz:

Aktív összetevők: 0.36% hidrogén-peroxid.

Kiszerezés



6 x 750ml: Használatra kész hab formájú készítmény.

Engedélyek

CE Az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján
0088 orvostechnikai eszköznek minősített termék, IIa osztály.

Tárolás

Az eredeti tartályban tárolandó.
Tárolja zárt tartályban.
Fagytól távol tartandó.

Az Oxivir Excel Foam rendkívül hatékony fertőtlenítést biztosít olyan biztonsági profillal kombinálva, amely megkönnyíti az előírások betartását.